



tianDe®

Ваша красота  
зависит от вас!

Мезороллер



## Новые стандарты в области ухода за кожей

Здоровый цвет лица, упругая молодая кожа без малейшего намека на морщины и рубцы – согласитесь, об этом мечтает каждая женщина (да и немало мужчин!). И вот, обозначив для себя цель, мы ищем чудодейственные кремы, обращаем свой взор на народные средства, прислушиваемся к советам подруг и зачастую тратим внушительные суммы на регулярные походы к косметологам. А ведь с возрастом обычные косметологические процедуры (маски, массаж, пилинг, миостимуляция и пр.) теряют былую эффективность, и тогда специалисты предлагают для сохранения молодости лица... всевозможные инъекции. Здесь и ботокс, и мезотерапия, и прочие инвазивные (заметим, не самые приятные и совсем не дешевые!) способы. Безусловно, эффект они дают существенный, но... после того как сойдут отечность, покраснения и прочие неэстетичные последствия.


### Требует ли ваша красота таких жертв?

Компания TianDe с уверенностью говорит: нет! И предлагает вашему вниманию революционный прорыв в косметологии – уникальную разработку, позволяющую не только сохранить молодость вашей кожи, но и устраниТЬ ее недостатки.

### Мы рады представить вам эффективную альтернативу инъекциям – мезороллер.

Чтобы разобраться, что такое **мезороллер**, и понять, почему он так эффективен, нужно обладать некоторыми знаниями из области косметологии. Итак...



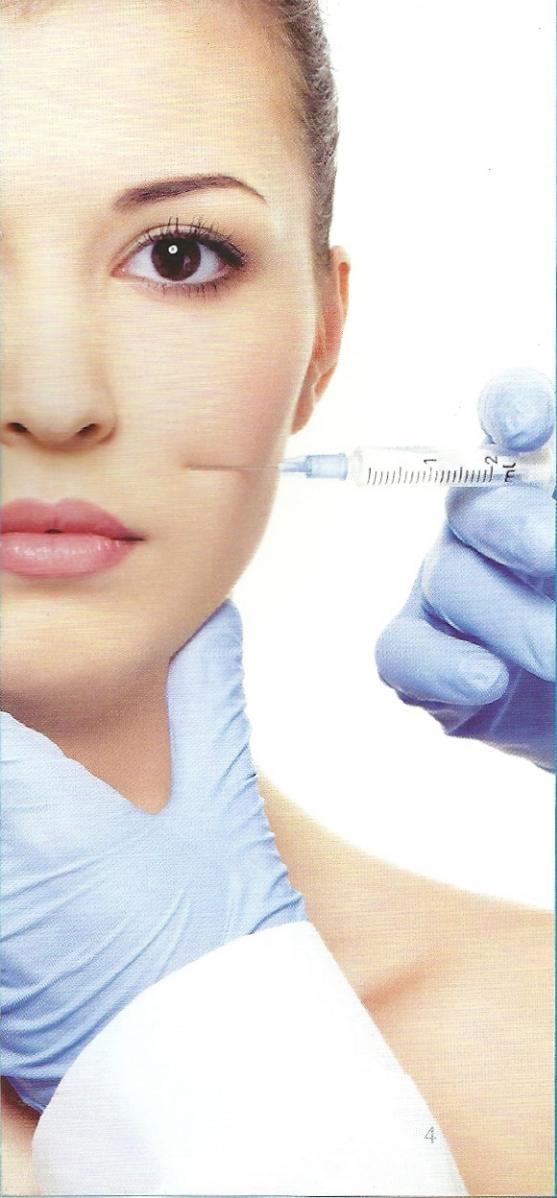

## Просто – о научном

Вспомним строение кожи человека. Ее верхний слой – эпидермис – самый тонкий, при этом он состоит из нескольких слоев клеток: ороговевших, пигментообразующих, клеток иммунной системы и др. Средний – дерма, соединительная ткань, «каркас» кожи, в котором содержатся волокна эластина и коллагена, располагаются нервные окончания, сальные и потовые железы, кровеносные и лимфатические сосуды. Нижний слой кожи – это гиподерма, или подкожножировая клетчатка.

Именно средний слой кожи влияет на ее тонус и упругость. А потому популярная сегодня мезотерапия призвана воздействовать как раз на дерму: при помощи инъекций лекарственные вещества и витамины доставляются туда, где они способствуют улучшению обмена веществ, выводу избыточной жидкости, улучшению регенерации клеток.

Но мезотерапия – это нечто большее, нежели простая косметологическая процедура. Это понятно уже из названия: мезо – «средний», терапия – «лечение». К тому же введение препаратов при помощи шприца не только травмирует кожу, но и доставляет немало неприятных ощущений.

## Красота без жертв


Новейший продукт компании TianDe позволяет каждой женщине долго оставаться красивой и молодой без каких бы то ни было инъекций! **Мезороллер** – это ваш индивидуальный салон красоты. С его помощью вы сможете самостоятельно, не выходя из дома, добиться того эффекта, которого призваны достичь инвазивные мезотерапевтические процедуры. Вот только никакие инъекции вам теперь совершенно не понадобятся!

Судите сами. Даже название **мезороллера** содержит в себе общую часть с названием инвазивной терапии. А вот способ воздействия приятно отличается. **Мезороллер** – это валик, оснащенный МИКРОиглами. Массаж кожи с его помощью не только не доставит вам хоть сколько-нибудь неприятных ощущений, но и подарит массу удовольствия. Микроиглы проникают в кожу на глубину 0,2 мм. При этом происходят улучшение кровообращения, активная выработка эластина и коллагена (белки, составляющие основу дермы), которые, как известно, отвечают за упругость кожи и ее способность к самовосстановлению.

Кроме названных уже потрясающих эффектов **мезороллер** обладает удивительной способностью повышать эффективность всасывания биологически активных веществ в кожу.

**Будьте уверены: эффект от применения мезороллера превзойдет даже самые смелые ожидания!**



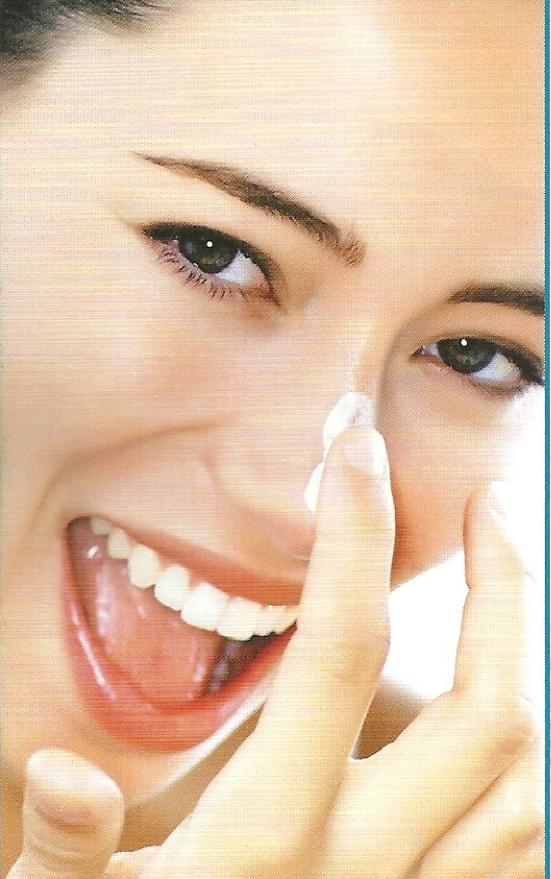

## При каких проблемах поможет мезороллер

Вы хотите придать своей коже упругость и сияющий вид? **Мезороллер** поможет повысить тургор кожи, улучшить ее плотность за счет приятного массажа.

Вам необходимо восстановить текстуру кожи, устраниТЬ рубцы постакне, избавиться от растяжек? **Мезороллер** эффективен и в этом случае – с его помощью состояние кожи улучшается, рубцы постепенно сглаживаются, кожа приобретает свежий вид.

Мечтаете избавиться от пигментных пятен? Воспользуйтесь мезороллером – и вы увидите, как ваша кожа становится светлее, пигментация исчезает.

Вы не хотите поддаваться времени, ваша цель – устраниТЬ морщины и омолодить кожу? **Мезороллер** станет для вас лучшим помощником – он не только предотвратит появление новых морщин, но и избавит от уже имеющихся. Очень скоро вы с радостью увидите в зеркале свое помолодевшее лицо.

### Преимущества использования мезороллера

- Безболезненность процедуры массажа
- Отсутствие побочных эффектов
- Широкая область применения
- Сохранение целостности эпидермиса
- Многократно усиленный эффект от использования косметических средств
- Быстрый результат
- Существенная экономия средств

## Омолаживающие инъекции? Нет! Домашний салон красоты? Да!

Эффект от использования мезороллера сопоставим с новейшими косметологическими инъекционными процедурами, но при этом его применение:

- а) нетравматично,
- б) приятно,
- в) необременительно для семейного бюджета.

Комфортная альтернатива инвазивной косметологии в «лице» мезороллера сэкономит ваше время (ведь его не придется тратить на дорогу в салон красоты и обратно), деньги (домашний массаж мезороллером обойдется вам в сотни раз дешевле, чем курс омолаживающих процедур у косметолога) и нервы (не секрет, что многие дамы очень чувствительны, и даже один только вид шприца может повергнуть их в шок).

Вы мечтаете стереть с лица все несовершенства, повернуть время вспять, избавиться от рубцов, растяжек, пигментации – и все это без ужасных уколов, по приятной цене и не боясь побочных эффектов?

Тогда возмите на вооружение революционную разработку современных косметологов – мезороллер! С ним вы не только устраниете недостатки кожи, но и получите уникальный шанс предотвратить появление возрастных изменений.





tianDe  
мезороллер



## Использование мезороллера с косметическими средствами

Для того чтобы процесс омоложения при помощи мезороллера шел еще быстрее, компания TianDe предлагает воспользоваться активными средствами. Проникая в дерму, они дают максимальный результат.

Активные средства, рекомендуемые к использованию с мезороллером, для вашего удобства мы разделили по показаниям.



### Показания

- Подтяжка лица
- Восстановление овала лица
- Уплотнение, укрепление кожи
  
- Устранение и предотвращение морщин
- Обновление, омоложение кожи
- Стимулирование выработки коллагена
  
- Пигментация
- Нормализация выработки меланина
- Восстановление барьерной функции кожи



**Рекомендуемые средства**

**Область обработки**

NANO CORRECTOR лифтинг-эффект (код:12201)

Питательный восстанавливающий ночной крем серии Marine Collagen (код: 13502)

Интенсивный лифтинг-крем серии Collagen Active (код: 12703)

Укрепляющая и подтягивающая эмульсия для лица и шеи серии Collagen Active (код: 12705)

NANO CORRECTOR ботокс-эффект (код:12202)

Питательный восстанавливающий ночной крем серии Marine Collagen (код: 13502)

Омолаживающая энергетическая эмульсия серии Zhenfei perfect (код: 12805)

Интенсивный крем-уход от морщин серии Zhenfei perfect (код: 12804)

Осветляющий крем для лица серии Solution (код: 13202)

Лицо, шея,  
область  
под глазами

Лицо, шея,  
область  
под глазами

Лицо, шея,  
руки  
(проблем-  
ные участки  
кожи)



# Инструкция по применению

Стандартная процедура в домашних условиях может занимать от 5 до 10 минут в зависимости от размера обрабатываемой области. Можно повторять процедуру 3-4 раза в неделю.

## Шаг 1 – очистка кожи

Удалите макияж и тщательно очистите кожу с помощью геля для умывания, ополосните и промокните салфеткой.

## Шаг 2 – нанесение активных ингредиентов

Нанесите активный препарат на обрабатываемую область.

## Шаг 3 – использование мезороллера

Разделите область обработки на отдельные зоны (например: лоб, нос, щеки, область вокруг рта и область шеи). Каждую зону обрабатывайте мезороллером без нажима по 10 раз вертикально, горизонтально и затем по диагонали в обоих направлениях.



1. Нежно проведите мезороллером 10 раз вертикально и 10 раз горизонтально.
2. Проведите массажным валиком по диагонали в обоих направлениях с одинаковой интенсивностью.

## Шаг 4 – уход за мезороллером

До и после каждой процедуры на 5-10 секунд погрузите **мезороллер** в раствор для стерилизации инструментов.

## Рекомендации к использованию

**Мезороллер** можно применять для использования как на лице и шее, так и на любых других зонах.

Проводить процедуры чаще одного раза в день не рекомендуется.

**Мезороллер** относится к индивидуальным средствам применения. Никогда не используйте чужой массажный валик.

Излишнее давление на **мезороллер** во время проведения процедуры может привести к нежелательным последствиям.

Если наблюдается внезапное и продолжительное раздражение в зоне обработки, прекратите процедуру и обратитесь к специалистам в области ухода за кожей.

Проявляйте осторожность в обращении с **мезороллером** – его падение может привести к повреждению игл.

## Противопоказания

Запрещено использование **мезороллера** на раздраженной или инфицированной коже: при грибковых и вирусных инфекциях, угревой сыпи, гнойничковых поражениях кожи, экземе, псориазе, на открытых раневых поверхностях и любых новообразованиях (бородавки, крупные родинки, кератомы и др.), куперозе.



A barcode is positioned above an ISBN number. The ISBN number is 4 6010021254260.

4 6010021254260

[www.tiande.ru](http://www.tiande.ru)

